

< 18-30 >
2018年12月

先生各位

「クオンティフェロン（QFT）」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび標記検査項目につきまして、現行試薬の販売終了に伴い、検査試薬、専用容器を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

何卒 ご高承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■変更内容:

	新	現
項目コード	2612	3478
検査項目名称	クオンティフェロン プラス (QFT-Plus)	クオンティフェロン(QFT)
基準値	陰性	
報告形式	判定 TB1 TB2 MITOGEN NIL	判定

変更後、判定結果は『陰性』『陽性』『判定不可』のご報告となり、『判定保留』はございません。

詳細は裏面の結果の解釈をご参照ください。

専用容器についても変更がございますので、詳細は裏面の専用容器の変更をご参照ください。

■変更理由: 現行試薬、専用容器販売終了のため

■変更実施日: 2019年 2月 1日(金)受付分より

●現行のクオンティフェロン(QFT)[項目コード3478]については、2019年1月31日受付分をもちまして受託中止とさせていただきます。

※ 項目コード及び結果報告項目が変更となるため、電子カルテ・健診システム等をご利用の際は、お使いのメーカーのサポート窓口へ項目紐付けの変更をご連絡ください。

以上

※裏面もご覧ください。

■ 検査概要：


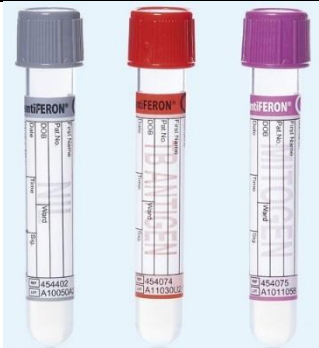
検査項目名称	クオンティフェロン TBゴールド プラス(QFT-Plus)
項目コード	2612
検体必要量	QFT プラスチューブ 4本(各1mL ずつ採血)
保存方法	22℃±5℃(室温) 採血から検査まで 16 時間以内
所要日数	3 ~ 7 日
検査方法	ELISA法
実施料(判断料)	630点(免疫)
基準値	陰性

CD4+T細胞に加えて新たにCD8+T細胞の応答を検出することにより、免疫機能低下症例での感度が向上しました。

■ 結果の解釈：

Nil値 (IU/mL)	TB1 値 (IU/mL)	TB2 値 (IU/mL)	Mitogen 値 (IU/mL)	結果判定	結果解釈	
8.0 以下	0.35 以上かつ Nil 値の 25%以上	不問	不問	陽性	結核感染を疑う	
	不問	0.35 以上かつ Nil 値の 25%以上	不問	陽性		
	0.35 未満、あるいは 0.35 以上かつ Nil 値の 25%未満			0.50 以上	陰性	結核感染していない
	0.35 未満、あるいは 0.35 以上かつ Nil 値の 25%未満			0.50 未満	判定不可	結核感染の有無について判定できない
8.0 を超える	不問	不問	不問	判定不可		

■ 専用容器の変更：

変更内容	新	現
容器名称	クオンティフェロンTBゴールドプラス 採血管	クオンティフェロンTBゴールド 採血管セット
容器番号	49	
容器画像		
採血本数 及び採血量	4本 各1ml採血	3本 各1ml採血

※ 現検査容器につきましては1月31日までご利用いただけます。

※ 新容器の採血方法については、後日改めてご案内いたします。