

< 2 5 - 2 9 >
2 0 2 5 年 9 月

先生各位

「ケンキポーターⅡ 容器」変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

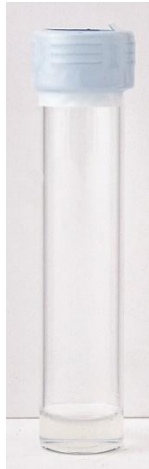
このたび、標記容器におきまして、下記のとおり採取容器を変更させていただきますのでご案内申し上げます。

何卒ご高承賜りますようお願い申し上げます。

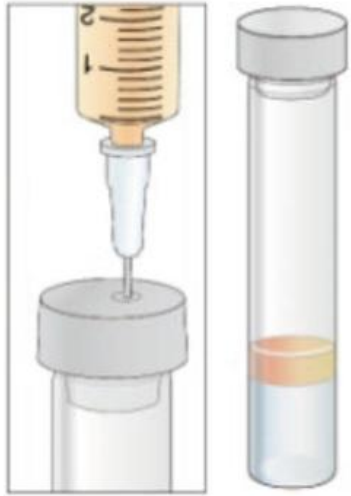
謹白

記

■変更内容 : ケンキポーターⅡ 【容器番号 34】

	新	現
メーカー	栄研	テルモ
キャップ色	グレー	青
有効期限	6カ月間	2年間
容器画像		

●新容器の使用方法

液体検体（穿刺液、消化液等）	固形検体（膿、糞便、組織片等）
 ① 穿刺部（ゴムキャップ上の小円）を消毒用アルコール綿等で消毒します。 ② 注射針を穿刺部に垂直に穿刺し、液体検体を注入します。 ③ チューブラベルを貼付し輸送してください。 ④ 検体は速やかに検査してください。やむを得ず保存する場合は冷所保存してください。	 ① ゴムキャップを消毒用アルコール綿等で消毒します。 ② ゴムキャップを外し、固形検体を入れます。 検体は寒天の奥まで挿入してください。 ※綿棒は長さ7cmまで入ります。それ以上のものは切断してください。 ③ ゴムキャップを速やかにしっかり閉めます。 ④ チューブラベルを貼付し輸送してください。 ⑤ やむを得ず保存する場合は冷所保存してください。

■変更日：2025年 10月 1日以降変更となります。

※現容器につきましては、有効期限までご利用いただけます。

以上